

Superbrilliant[®] 双色蛋白 Marker (10~250kDa)

Superbrilliant[®] 2-color Regular Range Protein Marker(10~250kDa)

Cat. No.:ZS-PR24003

组分:

货号	名称	ZS-PR24003S	ZS-PR24003M	ZS-PR24003L
103084	2-color Regular Range Protein Marker(10~250kDa)	250 μL	250 μL×2	250 μL×10
	说明书	1 份	1 份	1 份

储存: 本品需冰袋运输; 4℃有效期 3 个月, -20℃有效期 2 年; 避免反复冻融。

简介: 本产品包含两种颜色十一种预染的蛋白质分子量标准, 各条带浓度约为 0.2~0.6 mg/ml。Tris-Glycine 缓冲液中分子量范围为 10-250 kDa, 其中 25 kDa 和 70 kDa 的蛋白条带为红色, 其余 9 个蛋白条带为蓝色。可通过此预染蛋白 Marker 直接观察蛋白电泳及清晰地判断 Western Blot 的转移效果。

储存液成份: 62.5mM Tris-HCl (pH 7.5/25°C), 1mM EDTA, 2% (W/V) SDS, 10mM DTT, 1mM NaN₃, 33% (V/V) glycerol。

使用方法:

使用前请将双色预染蛋白质 Marker 置于室温数分钟, 彻底溶解并轻弹混匀后, 无需加热, 取 5 μ l 双色预染蛋白质 Marker 加入到凝胶 (10/15 孔 mini-gel) 孔内; 若加样孔较大或凝胶较厚 (>1.5mm), 可适当增加双色预染蛋白质 Marker 的用量。该产品适用于蛋白质凝胶电泳和蛋白质转膜等 (从 PAGE 胶转移到 NC 膜或 PVDF 膜上) 实验。

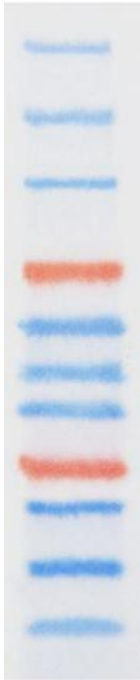
注意事项:

1. 本品已包含上样缓冲液, 直接使用, 不可加热煮沸、稀释或添加还原剂;
2. 为避免反复冻融及污染, 可将本产品分装后, -20°C 保存;
3. 预染蛋白质分子量标准仅用于分子量的近似参考, 批次间差异约为 5%;
4. 在低浓度凝胶中, 低分子量条带将会与前沿共迁移而无法分出;
5. 在不同凝胶和缓冲液系统中, 预染蛋白质的迁移率会有所差别, 可用非预染蛋白质分子量标准进行校正, 并按校正后的结果正常使用;

6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；

7. 本产品仅限科研使用。

不同电泳条件下双色预染蛋白质 Marker 的条带迁移率和大概分子量如下：

Band	Color	TRIS- GLYCINE	BIS-TRIS (MES)	BIS-TRIS (MOPS)	4%~20% 聚丙烯酰 胺
1	Blue	250	230	230	
2	Blue	150	140	140	
3	Blue	100	98	98	
4	Red	70	63	63	
5	Blue	50	49	49	
6	Blue	40	38	39	
7	Blue	35	33	34	
8	Red	25	22	22	
9	Blue	20	21	20	
10	Blue	15	14	15	
11	Blue	10	9.8	10	